

# ヒーリフト トラクションブーツ

## 取扱説明書



## 目次

|                         | ページ |
|-------------------------|-----|
| 1. 安全上の警告・注意            | 1   |
| 2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造    | 1   |
| 3. 一般的な使用方法とその注意事項      | 2   |
| 3-1. 使用方法               | 2   |
| 3-2. その他の使用例            | 4   |
| 4. 医療機器の洗浄方法、保管方法に関する事項 | 5   |
| 4-1. 洗浄方法               | 5   |
| 4-2. 保管方法               | 5   |
| 4-3. 使用期限               | 5   |
| 5. 保守点検に関する事項           | 5   |
| 6. 連絡先に関する事項            | 5   |

## 1. 安全上の警告・注意

ご使用前に、この「安全上の警告・注意」をよく読んで、正しくお使いください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**⚠ 注意：**ご使用の際、「注意」していただく事項です。

これらの注意事項を無視して使用した場合、ケガや機器の損傷などの事故につながる可能性があります。


### 【禁止事項】

- 1) 感染防止のため、1 症例に 1 個ご使用ください。使用済みの本品を他の患者に再使用しないでください。
- 2) ヒーリフト トラクションブーツの材質に過敏症がある患者には使用しないでください。
- 3) 4.5 kg を超える牽引はしないでください。機器の破損を招くおそれがあります。
- 4) 本品の操作に熟練した方以外は使用しないでください。
- 5) 本品の二次的加工をしないでください。
- 6) 使用前に変形、損傷等が認められた場合は、使用しないでください。
- 7) 使用目的以外に使用しないでください。
- 8) 装着部位に皮膚障害、循環障害、神経障害、浮腫等のある患者には使用しないでください。使用中に皮膚障害等が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。

### 【お願い】

- 1) 患者に対して装着後の骨折部の疼痛の有無やしびれなどの症状がないか注意を払ってください。
- 2) 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切な方法で破棄してください。

## 2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

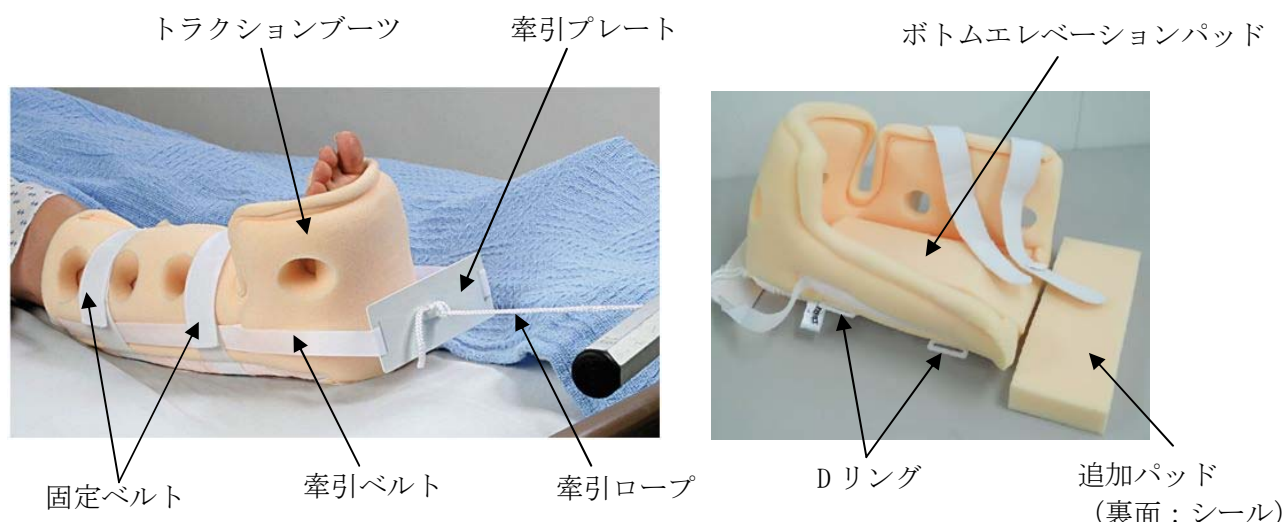

| 注文コード      | 商品名             |
|------------|-----------------|
| 030-104-04 | ヒーリフト トラクションブーツ |

材質：ポリウレタンフォーム（ラテックスフリー）

### 3. 一般的な使用方法とその注意事項

#### 3-1. 使用方法

- 1) 固定ベルトを外し、牽引プレートをブーツの外側（足底部）にくるようにします。開口部を広げ、中に入っている追加パッドを取り出します。  
※追加パッドはあとで必要になる場合があるため保管しておいてください。



- 2) 牽引側の下腿をボトムエレベーションパッドの上にのせます。



床ずれ防止のため、踵を浮かせてください。



- 3) 2本の固定ベルトを脛の上からまわしてDリングに通し、折り返して固定します。



- ・固定ベルトは、強く巻き過ぎないようにしてください。血流を阻害するおそれがあります。
- ・患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着してください。




- ・ブーツ内でのぐらつき等がないことを確認してください。
- ・緩い場合は固定ベルトを再調整し、必要に応じて追加パッドで調節してください。



- 4) 牽引ベルトの中央に牽引プレートがくるように調節してください。牽引ロープをほどいて、ベッド足側に設置した滑車に取り付け、牽引を開始します。



牽引ベルトにねじれが無いこと、牽引プレートとブーツ底面が平行であることを確認してください。

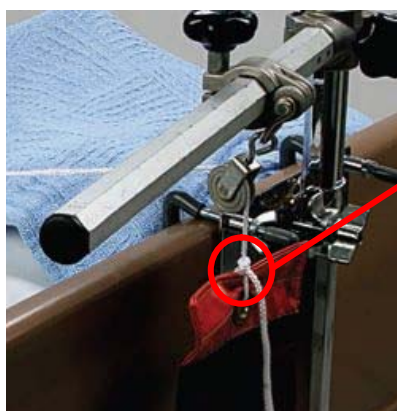

緩まないようにしっかり結んでください。



牽引ロープはブーツ底面の端がベッド面から 6 mm ほど隙間が空くようにやや上方へ牽引してください。



- ・本品が外れる可能性がありますので、牽引中は、固定ベルト及び牽引ロープの緩み、牽引方向にずれがないか、滑車と錘の状態を定期的に確認してください。
- ・使用中は、6～8 時間毎にブーツを外して、虚血による変色、しびれ等がないか確認してください。



- 5) 牽引終了後、患者から取り外します。必要に応じて、ブーツから牽引ベルトを取り外し、床ずれ防止用ブーツとしてご利用いただけます。



## 3-2. その他の使用例

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 高さ・幅の調節</p> <p>踵がベッドに接触したり、ブーツが大きい場合、追加パッドをボトムエレベーションパッドの上に貼り付けます。</p>        | <p>2. 長い下腿</p> <p>追加パッドを体幹部方向にずらして貼り付けます。</p>                                       | <p>3. アキレス腱の場合</p> <p>アキレス腱のあたりに赤みが見られる場合、ボトムエレベーションパッドに V 字型の切れ込みを入れます。追加パッドも使用する場合は同様に切り込みを入れ、ボトムエレベーションパッドの上に貼り付けます。</p> |
|    |    |                                          |
| <p>4. 外転防止</p> <p>追加パッドをブーツの外側に平行にあてがって貼り付けます。</p>                                  | <p>5. 足部の下垂防止</p> <p>追加パッドを足底部に沿うよう垂直にあてがって貼り付けます。</p>                              |                                                                                                                             |
|  |  |                                                                                                                             |



下腿用カフとの併用は避けてください。

- ・ DVT ポンプ下腿用カフを併用すると、トラクションブーツとの摩擦抵抗が減少するため牽引時にトラクションブーツが抜けてしまうおそれがあります。
- ・ やむを得ず併用する場合は、フットカフ（足底用カフ）のみをご使用ください。

## 4. 医療機器の洗浄方法、保管方法に関する事項

### 4-1. 洗浄方法

- 1) 中性洗剤を使用してぬるま湯で手洗いをし、乾燥させてください
- 2) アルコール等で湿らせた布で清拭してください。
- 3) 洗濯機、乾燥機のご使用の際は、牽引ベルト、牽引プレートを外し、固定ベルトの面ファスナー部分を箆合させ、洗濯ネットに入れてください。



本品は1患者使用です。感染防止のため、使用済みの本品を他の患者に再使用しないでください。

### 4-2. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。

### 4-3. 使用期限

使用期限：製造年月より5年〔自己認証（当社データ）による〕

## 5. 保守点検に関する事項

使用前に汚れ・破損等がないか点検してください。異常が認められた場合は使用しないでください。

## 6. 連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>